

POCKETCHEM™ UA

Un diagnóstico de orina directo
en tiempo real



```

ID -----
2011-09-12 19:47 10PA 26°C
*****
*GLU 3+          500 mg/dL
*PRO 4+          1000 mg/dL
*URO 1+          2 mg/dL
BIL -            mg/dL
CRE              200 mg/dL
PH              6.0
BLD +-          0.03 mg/dL
*KET 4+          150 mg/dL
NIT -
*LEU              500Leu/µL
*P/C 2+          >500mg/gCr
-----


```

POCKETCHEM™ UA

El analizador de orina más simple y compacto

Características

Peso:	Analizador 180g, Impresora 180g
Dimensiones:	124x81mm
Pantalla:	LCD
Impresora:	Térmica integrada y desmontable
Conectividad:	RS232 C
Memoria:	100 resultados

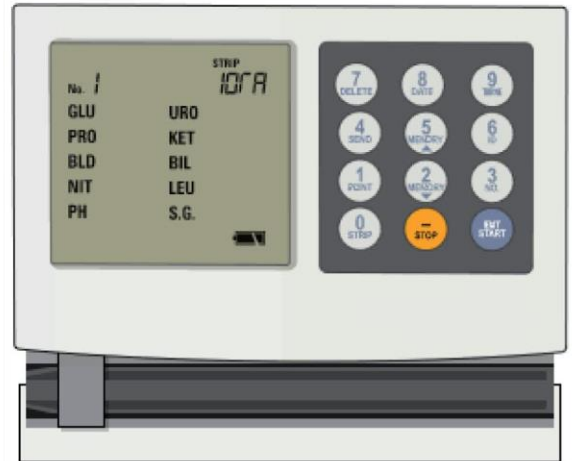


Principios

Principio de medición:	Reflectometría 3 longitudes de onda: 565, 632, 755mm
Tiempo de análisis:	60 segundos desde la inserción de la muestra.
Visibilidad:	LED tres ondas e intensidad constante para una precisión completa.
Parámetros:	Glucosa



Proteínias
 Urobilinógeno
 Bilirubina
 Creatinina
 pH
 Sangre
 Cuerpos cetónicos
 Nitritos
 Leucocitos
 Cálculo automático del ratio proteínas/creatinina

Ni pipeteo ni centrifugación necesaria.
 Diagnóstico urinario en minutos que permite la detección inmediata del fallo renal.

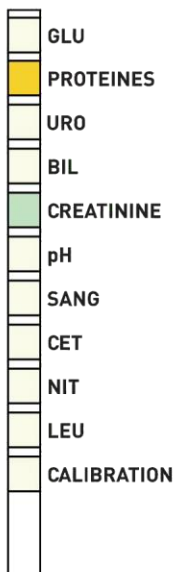

scil animal care company
 C/ Imperial de Aragón
 31500 Tudela
 Navarra
 Telf: 94882 46 55
www.scilvet.es